

Multilift C1

Hubsystem universell einsetzbar für verschiedene Liegeflächen und geeignet als Bett-im-Bettssystem. Einfache Anpassung durch in der Breite verstellbares Auflagesystem.

Bed lifting system universal suitable for different bed platform.


Easy fitting with adjustable support system.



0-70 °
Rückenteil
Backrest



0-30 °
Fußteil
Footrest

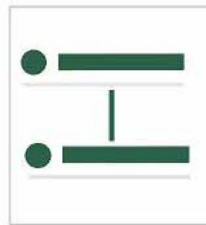

245 - 795 mm
Höhenverstellbar
Height adjustment



optionale
Trendelenburg/
Antitrendelenburg
Funktion

MULTILIFT


Homecare Betthubsystem /bed lifting base




MULTILIFT

Homecare Betthubsystem /bed lifting base

MULTILIFT C1 ausgefahren / in high position









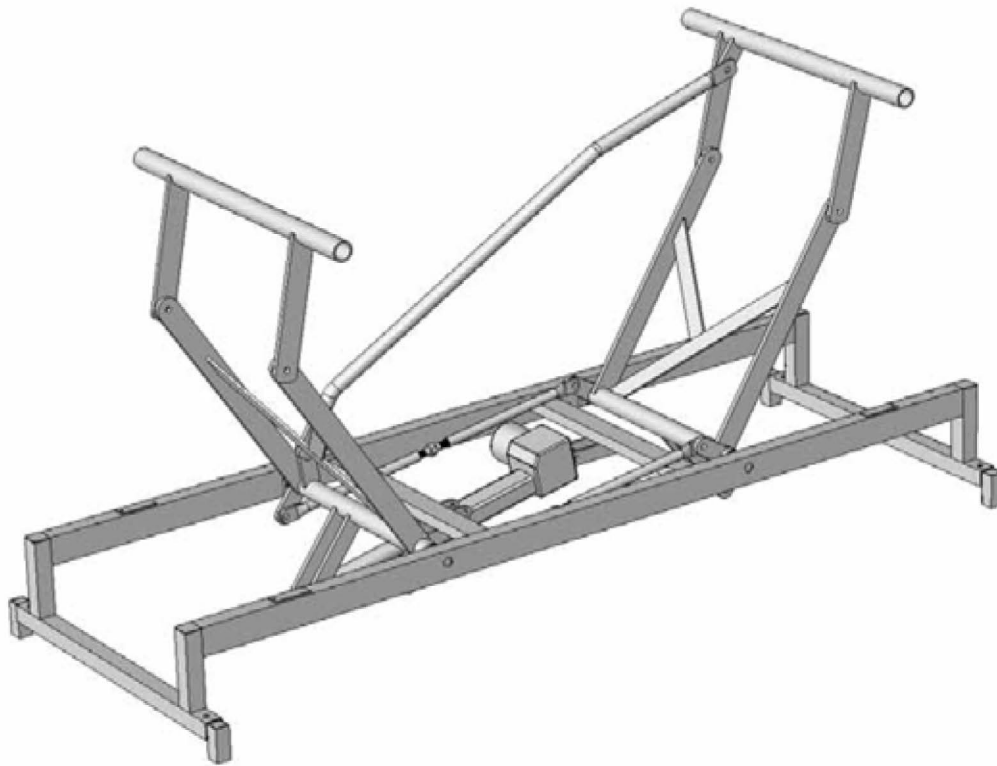


MULTILIFT C1 eingefahren / in low position

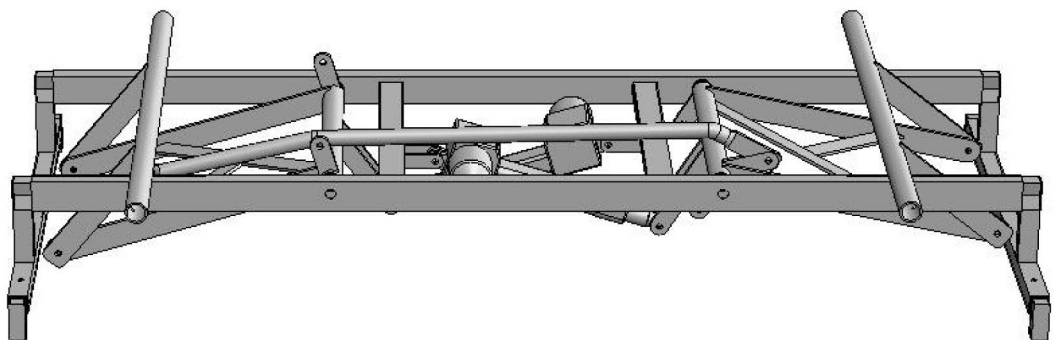

MULTILIFT

Homecare Betthubsystem /bed lifting base

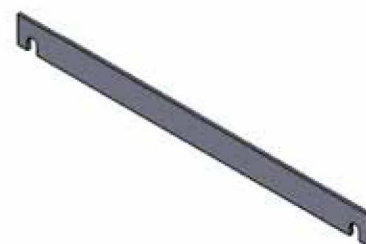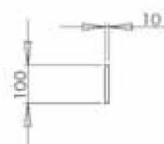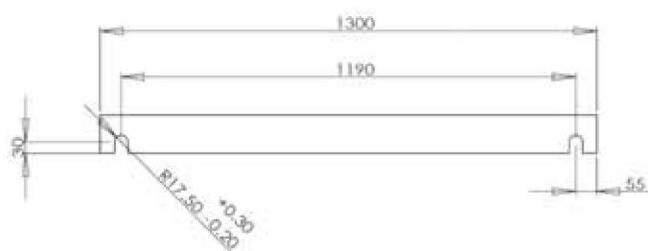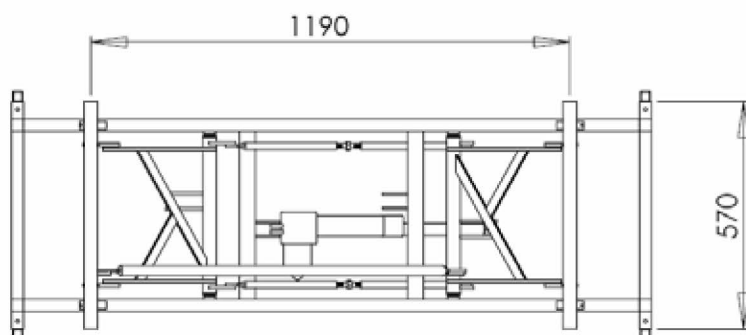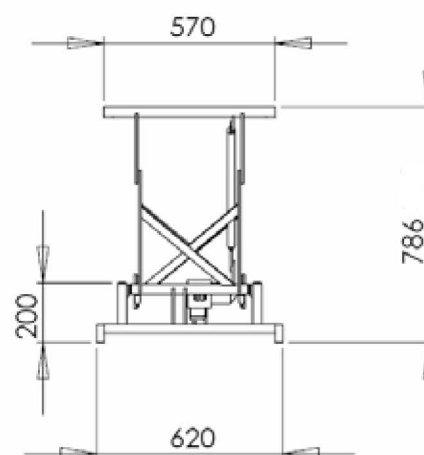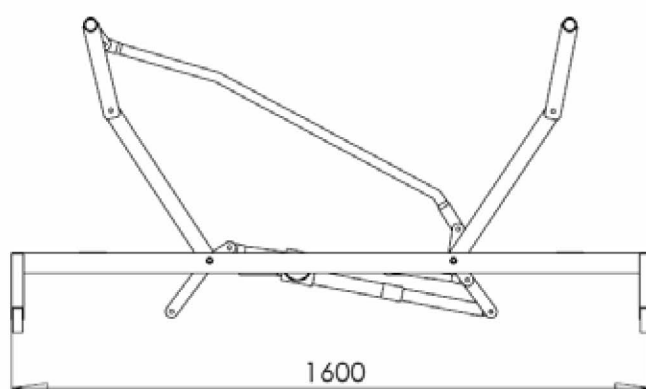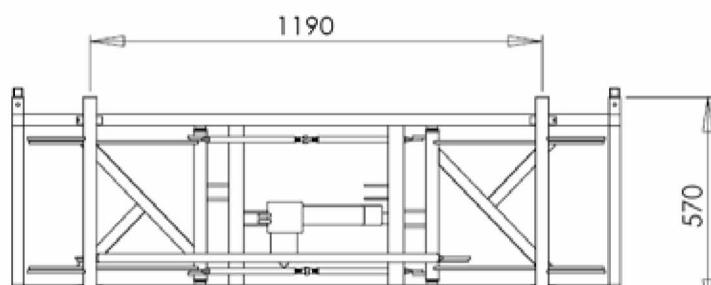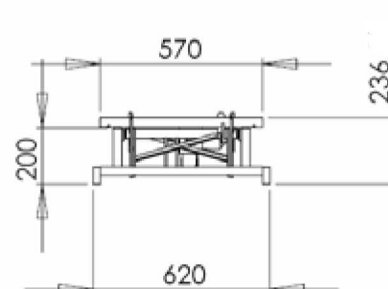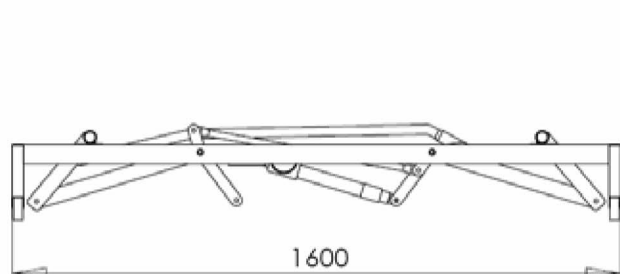


Schablone zur Montage der
Liegefläche / gauge for assembly
of the bedplatform

MULTILIFT

Homecare Betthubsystem /bed lifting base

Beschreibung

Hubsystem zur motorisch stufenlosen Höhenverstellung einer Liegefläche. Einfache Adaption verschiedener Liege-flächen durch in der Breite verstellbares Auflagesystem.

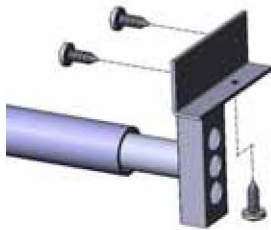

Fixierung vorhandener Bettrahmen / Lattenroste durch Verschraubung mit dem Auflagesystem:


Normen

Erfüllt DIN 60601-2-38 und DIN EN 1970.


Die elektrischen Antriebskomponenten (Hersteller LIMOSS) erfüllen die Schutzklasse IPX 4.

Ausführungen

Variante 1:
Ausstattung zur Auflage auf ein vorhandenes Rahmensystem über breitenverstellbare Winkel.

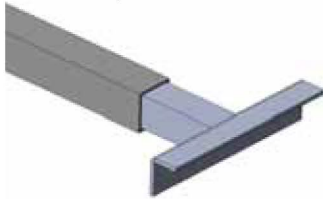

Variante 2:
Standsystem mit in der Breite verstellbaren Fußsäulen.

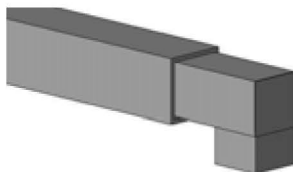

Specifications:

Bedlifting system for actuator lifting of bed laying area. Easy fitting of different laying areas with adjustable support system.

See pic

Fixation of bed frame or slatted frame with screwing to the support system.

Directives

In compliance with DIN 60601-2-38 und DIN EN 1970.

The actuator components of limoss are all protection-classe IPX4.

Modells

Model 1
Standing system with width adjustable legs



Modell 2
Fittings for support on frame system with width adjustable angles.



MULTILIFT

Homecare Betthubsystem /bed lifting base

Option Trendelenburg / Anti-Trendelenburg Lagerung

- Für medizinische Anwendungen kann ein 2-motorige Antriebssystem eingesetzt werden, so dass Kopf- und Fußteil unabhängig voneinander angehoben oder abgesenkt werden können (Trendelenburg/umgekehrte Trendelenburg Lagerung).
Diese Option ist auch nachrüstbar.

Option Trendelenburg / Antitrendelenburg laying position

- For medical application a 2nd actuator can be mounted in order to enable head and foot rests to be operated (up/down) independently for Trendelenburg / Antitrendelenburg laying position.

This option can be back fitted.



Oberflächen

Pulverbeschichtet RAL 9023, glatt

Nach Absprache können auch andere Farben und Oberflächenstrukturen realisiert werden

Surface

Paint coated RAL 9023, smooth

On request we can realize other colors and surface qualities.

Maße und Gewichte

Eigengewicht (o. Antrieb): 42 kg

Auflagegewicht (max.) :
1-Motor Version: 180 kg
2-Motor Version: 230 kg

Höhenverstellung : 550 mm
Breitenverstellung
Liegeflächenaufgabe : 90 - 100 cm

Breitenverstellung Standfüße / Rahmenauflage : 78 -90 cm

Option:

Lattenrost 90 oder 100 x 200 cm
5 Zonen mit 42 Holzfederleisten überlappend und Verstelldoppelmotor für Rücken- und Oberschenkelauflage

Measurement and weights

Own weight without actuators: 42 kg

Charge weight (max.):
1-motor version: 180 kg
2-motor version: 230 kg

Height adjustment: 550 mm
Width adjustment.
Laying support area: 90-100 cm

Width adjustment of standing legs / frame support:: 78-90 cm

Option:

Bedplatform 90 or 100 x 200 cm
5 zones with 42 overlapping wood multilayer laths and adjustment double motors for back and leg parts